

Mepilex Border Lite®


APÓSITO EXTRAFINO AUTOADHERENTE CON TECNOLOGÍA SAFETAC

- Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada.
- Se adapta perfectamente a cualquier superficie corporal.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- Gran capacidad de manejo del exudado.

Film posterior

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos.
- Barrera anti-virus y bacterias*.

* >25 nm

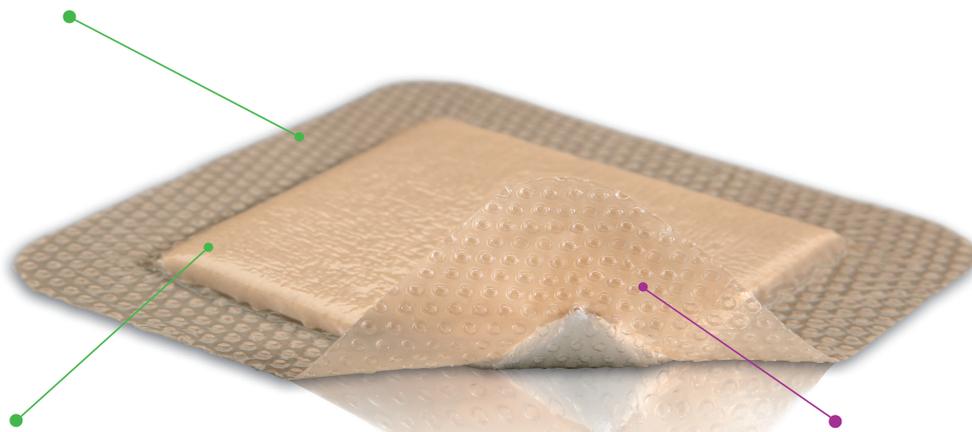

Dos capas protectoras

- Absorbe el exudado.
- Mantiene la integridad.

Safetac®
TECHNOLOGY

Capa con Tecnología Safetac®


- Atraumático para la herida y la piel perilesional.
- Minimiza el riesgo de maceración.

Tecnología Safetac®


Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva de suave silicona. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.safetac.com

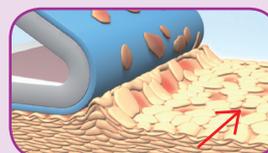


Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales

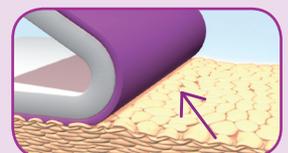


Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac

Forma de utilización

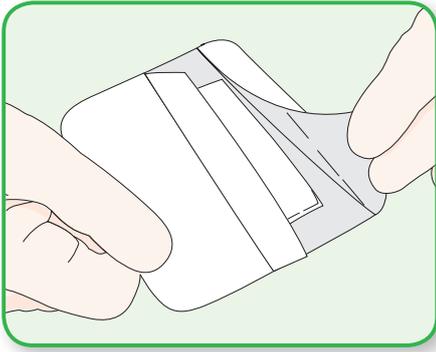

Limpiar la herida. Retirar el film protector.

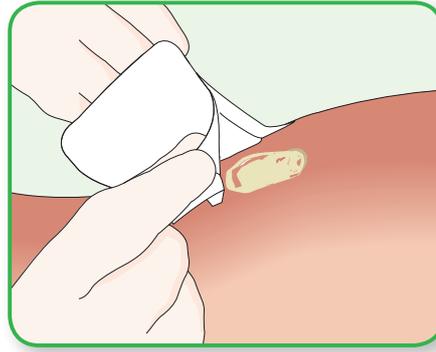

Colocar la parte adherente sobre la herida.
No estirar.

Indicaciones

Mepilex® Border Lite está diseñado para el tratamiento de un amplio rango de heridas con bajo o nulo nivel de exudado como úlceras en miembros inferiores, úlceras por presión, heridas traumáticas, abrasiones, cortes, heridas en dedos, ampollas, etc. Mepilex® Border Lite también puede ser utilizado como protección en pieles delicadas.

Nota

En caso de signos clínicos de infección, se puede seguir utilizando Mepilex® Border Lite junto con el tratamiento antibiótico apropiado y bajo supervisión.

Beneficios de Mepilex® Border Lite

- Muy adaptable a la herida.
- Gran capacidad de gestión del exudado.
- Amplia selección de tamaños.
- Minimiza el traumatismo y dolor durante los cambios de apósito.



PRESENTACIONES ● Mepilex Border Lite®

Nº Ref.	Tamaño cm	Uds./ env.	Uds./ TRP
281000	4 x 5	10	70
281100	5 x 12,5	5	65
281200	7,5 x 7,5	5	70
281300	10 x 10	5	50
*281600	12,5 x 12,5	10	80
281500	15 x 15	5	50
*281700	17,5 x 17,5	10	50

Sobres estériles

* Denominación comercial Mepilex Border e.m.

Financiado
S.S.

PRESENTACIONES ● Mepilex® Border e.m.

C.N.	Tamaño cm	Uds./ env.	Uds./ TRP
400118	7,5 x 8,5	3	45
400120	15 x 15	3	60

Sobres estériles