



ESPUMA DE POLIURETANO EXTRAFINA CON TECNOLOGÍA SAFETAC

- Atraumático para la herida y para la piel circundante durante la retirada.
- Se adapta perfectamente a cualquier superficie corporal.

Film posterior color piel

- Permeable a gases.
- Impermeable a líquidos.
- Barrera efectiva contra virus y bacterias*.



Cuerpo absorbente de espuma

- Absorbe el exudado.
- Se adapta a los contornos del cuerpo.
- Mantiene la integridad.

Suave capa de silicona Safetac®

- Atraumático para la herida y la piel perilesional.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- No se adhiere al lecho húmedo de la herida.
- Protección de pieles frágiles y delicadas.


Tecnología Safetac®

*Microbios mayores de 25 nm


Safetac® Menos trauma. Menos dolor.™

La Tecnología Safetac® es una tecnología exclusiva de suave silicona. Los apósitos con Tecnología Safetac® son atraumáticos incluso durante su retirada. Estos apósitos minimizan el traumatismo en la herida y la piel perilesional, lo que minimiza el dolor en el paciente. El riesgo de maceración se minimiza al sellar herméticamente los bordes de la herida.

Para más información visite www.safetac.com

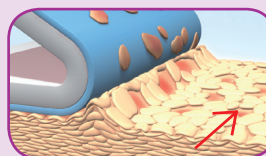


Desprendimiento de la piel con adhesivos convencionales

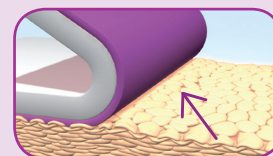

Sin desprendimiento de piel con la Tecnología Safetac


Forma de utilización de Mepilex® Lite

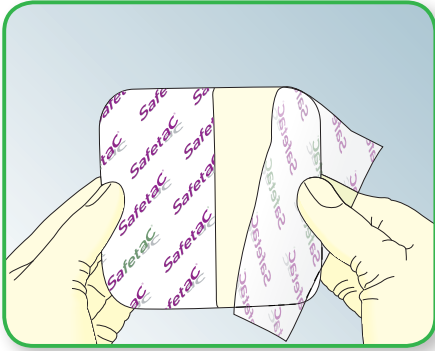

Limpiar la herida con suero salino.
Secar la piel de alrededor.
Retirar los papeles protectores.



Colocar la capa adherente sobre la herida.
No estirar. **Mepilex® Lite** debe cubrir la piel de alrededor al menos 2 cm. Si es necesario, **Mepilex® Lite** se puede cortar.

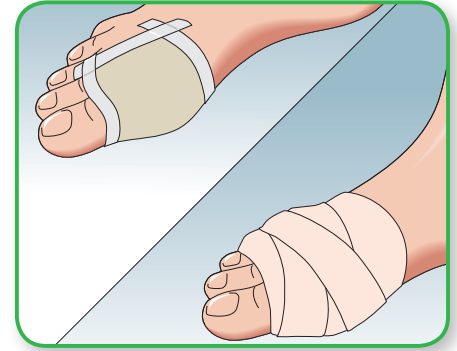

Fijar **Mepilex® Lite** con un vendaje o cualquier otra fijación cuando sea necesario.

Cómo funciona Mepilex® Lite

Mepilex® Lite es un apósito absorbente que absorbe el exudado y mantiene un medio ambiente húmedo en la herida, previniendo que el exudado penetre en la zona de alrededor, disminuyendo así el riesgo de maceración. La capa Safetac asegura que los cambios de apósito sean atraumáticos. **Mepilex® Lite** puede cortarse adaptándose a la forma y localización necesaria.

Indicaciones


Mepilex® Lite está diseñado para el manejo de un amplio rango de heridas de bajo a moderado nivel de exudado, tales como: úlceras vasculares, úlceras diabéticas, úlceras por presión, quemaduras, radiodermatitis y epidermolisis bullosa. **Mepilex® Lite** también puede utilizarse como protector en pieles frágiles y delicadas. **Mepilex® Lite** puede utilizarse junto con hidrogeles.

Beneficios de Mepilex® Lite

- Atraumático para la herida y para la piel de alrededor durante la retirada.
- Disminuye el dolor en el paciente durante la retirada.
- Minimiza el riesgo de maceración.
- Se adapta a los contornos del cuerpo.
- Delgado y cómodo de llevar.
- Fácil de manejar.
- Mantiene un medio ambiente húmedo.
- Se puede cortar.

Nota

Mepilex® Lite puede usarse en heridas infectadas bajo la vigilancia de un profesional sanitario.

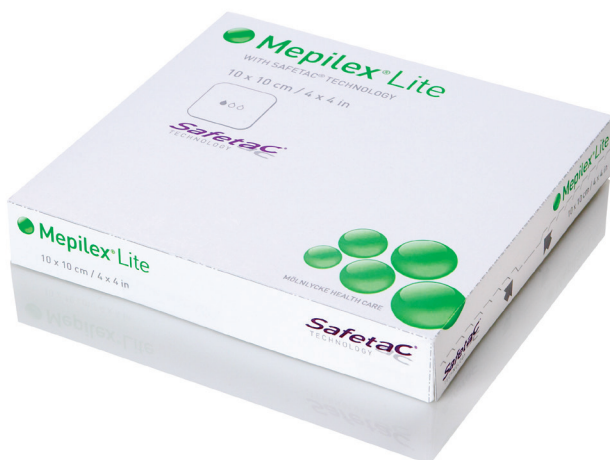

PRESENTACIONES MEPILEX® LITE

nº Art.	Tamaño cm	Uds/env. cont.	Uds/transp. cont.
284000	6 x 8,5	5	70
284100	10 x 10	5	50
284300	15 x 15	5	50
284500	20 x 50	2	12

Sobres estériles

Financiado
S.S.

PRESENTACIONES MEPILEX® LITE

C.N.	Tamaño cm	Uds/env. cont.	Uds/transp. cont.
496679	6 x 8,5	3	45
496687	10 x 10	3	30
496695	15 x 15	3	60

Sobres estériles