

## Cutimed® Sorbact®



**SIN  
LÁTEX  
EN LA FÓRMULA**

### Apósitos de captación bacteriana.

Apósitos absorbentes de captación bacteriana de tejido de acetato o algodón impregnado con un derivado de los ácidos grasos, altamente hidrofóbico, conocido como DACC (cloruro dialquilcarbamoilo). Cutimed® Sorbact® capta irreversiblemente y elimina las bacterias y hongos patógenos presentes en heridas infectadas o contaminadas, reduciendo la carga bacteriana en la herida y favoreciendo la creación de las condiciones óptimas para el proceso natural de cicatrización.

#### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Capta e inactiva microorganismos gracias a su exclusivo mecanismo de acción
- No libera agentes químicos que puedan afectar el proceso de cicatrización
- No desarrolla resistencia bacteriana
- Sin riesgos de alergias
- Sin citotoxicidad
- Sin presencia de endotoxinas en el lecho de la herida
- No existen contraindicaciones: se puede usar en niños, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia

#### INDICACIONES

Tratamiento de heridas colonizadas, contaminadas o infectadas con exudado de moderado a abundante, independientemente de su etiología:

- Heridas crónicas, como úlceras venosas, arteriales, diabéticas o úlceras por presión.
- Heridas postquirúrgicas dehiscentes
- Heridas traumáticas
- Heridas después de la extirpación de fistulas o abscesos
- Infecciones dérmicas por hongos

#### CONTRAINDICACIONES

Cutimed® Sorbact® no se puede emplear en combinación con pomadas ni cremas porque afectan negativamente a la acción antimicrobiana de los apósitos.

#### RECOMENDACIONES/ PRECAUCIONES DE USO

Condiciones de humedad son esenciales para asegurar la eficacia de Cutimed® Sorbact® y prevenir posibles adhesiones a la herida. Para las heridas secas o con una secreción mínima se recomienda utilizar los apósitos Cutimed® Sorbact® gel. Alternativamente se pueden combinar las compresas Cutimed® Sorbact® o las torundas con un hidrogel amorfo (por ej. Cutimed® Gel). Se recomienda examinar la herida con regularidad.

Cutimed® Sorbact® viene en empaque individual. No lo reutilice y no reesterilice. La reutilización del producto expone los pacientes a riesgos de transmisión de fluidos corporales y contaminantes en los tejidos que pueden contener patógenos. No utilice el apósito si el embalaje está abierto o dañado. Deseche cualquier apósito que esté abierto.

#### COMPOSICIÓN

##### Compresa absorbente:

Capa 1: tejido de acetato de color verde, impregnado con un derivado de los ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)

Capa 2: tejido de algodón

Capa 3: tejido de acetato de color verde, impregnado con un derivado de los ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)

Capa 4: 75% Viscosa, 25% Poliéster

Capa 5: celulosa impregnada con un derivado de los ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)

Capa 6: tejido no tejido de celulosa, rayón y poliéster recubierto de vinilacetato

Capa 7: tejido no tejido de viscosa y polipropileno

Fijados con pegamento caliente.

##### Gasa:

Gasa de acetato de color verde impregnada con un derivado de los ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)

##### Venda de gasa:

Gasa de algodón de color verde impregnada con un derivado de los ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)

##### Torundas redondas:

Torundas de acetato de color verde impregnadas con un derivado de los ácidos grasos DACC (cloruro dialquilcarbamoilo)

Los apósitos Cutimed® Sorbact® no contienen resinas o cauchos naturales que puedan dar reacciones alérgicas.

**PRESENTACIÓN**

Compresa absorbente, gasa y venda de gasa:

Envase individual estéril

La caja tiene la marca CE y código de barras.

Torundas redondas:

Envase estéril con 5 unidades

La caja tiene la marca CE y código de barras.

**ESTERILIDAD**

El producto se suministra estéril, esterilizado con rayos gama.

La esterilización se realiza con métodos normalizados y validados de acuerdo con la norma EN 11137:2015 y en pleno cumplimiento de los requisitos esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42CEE y la norma UNE EN 556.

**PRESENTACIÓN**

Compresas absorbentes:

Código de producto	Medida	Unidades / Envase	Unidades / Embalaje	Envases / Embalaje	EAN Unidad	EAN Envase	EAN Embalaje
72161-00	7cm x 9cm	40 un	80 un	2 cajas	4042809402865	4042809104400	4042809104417
72161-01	7cm x 9cm	5 un	80 un	16 cajas	4042809402889	4042809151558	4042809151565
72162-00	10cm x 10cm	40 un	80 un	2 cajas	7707331800240	4042809104523	4042809104530
72162-01	10cm x 10cm	5 un	80 un	16 cajas	4042809402902	4042809151572	4042809151589
72163-00	10cm x 20cm	20 un	40 un	2 cajas	7707331800257	4042809104554	4042809104561

Venda de gasa:







Código de producto	Medida	Unidades / Envase	Unidades / Embalaje	Envases / Embalaje	EAN Unidad	EAN Envase	EAN Embalaje
72166-00	2cm x 50cm	20	120	6	4042809402988	4042809104646	4042809104653
72167-00	5cm x 200cm	10	60	6	7707331800288	4042809104677	4042809104684

Gasa:

Código de producto	Medida	Unidades / Envase	Unidades / Embalaje	Envases / Embalaje	EAN Unidad	EAN Envase	EAN Embalaje
72164-00	4cm x 6cm	40	240	6	4042809402926	4042809104585	4042809104592
72164-01	4cm x 6cm	5	120	24	4042809402940	4042809151596	4042809151602
72165-00	7cm x 9cm	40	240	6	7707331800264	4042809104615	4042809104622
72165-01	7cm x 9cm	5	120	24	4042809402964	4042809151619	4042809151626

Torundas redondas:


Código de producto	Medida	Unidades / Envase	Unidades / Embalaje	Envases / Embalaje	EAN Unidad	EAN Envase	EAN Embalaje
72168-00	± 3cm ∅	5un. X 14 sobres (70 un.)	420	6	7707331800295	4042809104707	4042809104714

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
<b>Clase CE</b> IIB, estéril  <b>BSN medical SLU</b> ISO 9001:2008 			 5 años  	 BSN Medical GmbH Quickbornstrasse 24 D-20253 Hamburgo. Alemania  <b>Distribuidor</b> BSN medical SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex en formulación

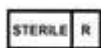

Producto esterilizado con rayos gama



Fabricante



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar

**BSN medical SLU**

Avda Baix Llobregat 3-5, Edificio Bayer, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel. Atención cliente: 93.521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10

B62495882

[www.bsnmedical.com.es](http://www.bsnmedical.com.es)